



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

## VASO DE ASPIRACION COMPLETO

**MARCA: CAMI**


**PRESENTACIÓN: 1, 2 Y 5 LITROS**

---

El Frasco autoclavable con tapa de rosca y asa para un fácil agarre, junta tórica de silicona autoclavable para un sellado óptimo, sistema de válvula de desbordamiento integrado en la tapa, escala graduada transparente en ml con intervalos de 100 ml o 200 ml, todo con marca CA-MI. Adecuado para aspiradores quirúrgicos CA-MI y para vacío centralizado, puede ser utilizado en los modelos NEW ASPIRET, NEW ASKIR 30, NEW ASKIR 30 BR, para que se puedan recoger los fluidos corporales como saliva, flema, sangre, etc.

### Especificaciones Generales:

- Elaborado en polipropileno (plástico reforzado).
- Autoclavable.
- Tapa con seguro interno para evitar derrames.
- Entrada para fluidos.
- Indicador de medida.

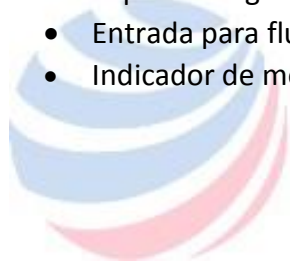

**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio



Central Telefónica:  
960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)